


セロックスラピッド X-ray

Celox Rapid X-ray detectable Z-Fold Hemostatic Gauze

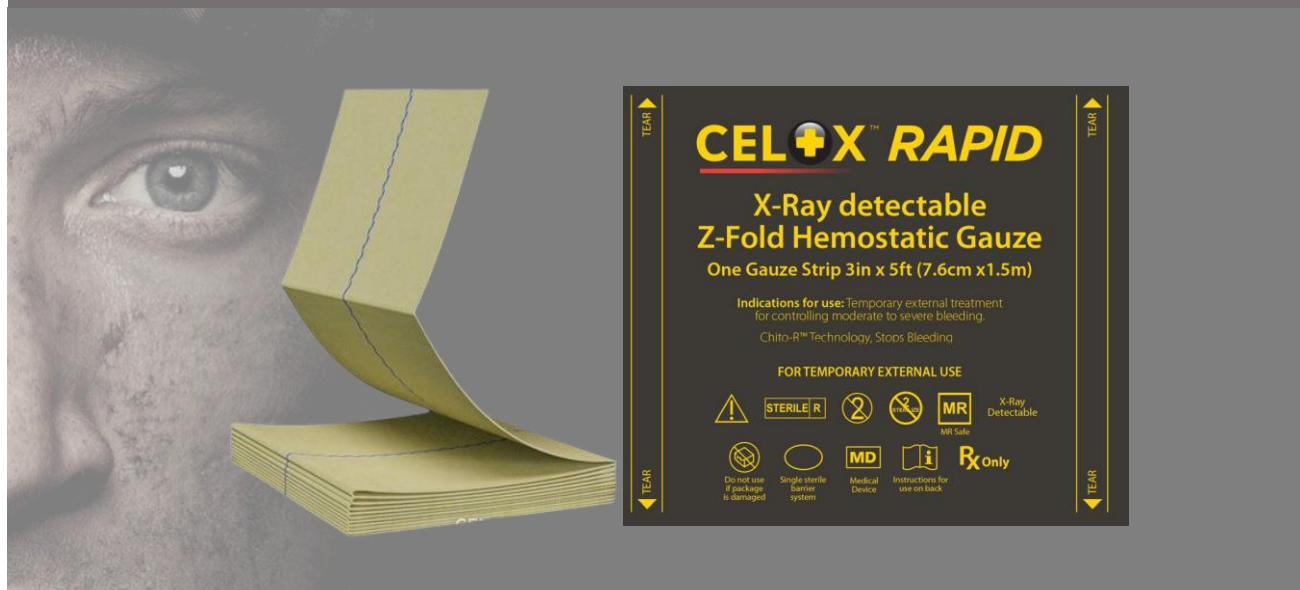

Specification

特徴

- ・ 従来品にX線検出可能な糸を追加し、識別を容易にしたモデル
- ・ Chito-R（カイトアールキトサン）を含んだZ折りガーゼ
- ・ 個装 滅菌済み
- ・ 血液を吸収し粘着性ゲルを生成することで、傷口を覆い止血します
- ・ 甲殻類アレルギーの原因となる物質が除去されたキトサンを使用
- ・ 圧迫止血に必要な時間を60秒まで短縮
- ・ 血液温度13℃まで有効
- ・ 最大72時間使用可能

仕様

- ・ 包装サイズ (cm) : W 11.1 x H 0.5 x L 13.0
- ・ 包装時重量 (g) : 30
- ・ ガーゼサイズ (cm) : 7.6 x 152.4
- ・ 有効期限 : ガンマ線滅菌 製造から5年
- ・ 医療機器製造販売届出番号 : 14B3X10037000024

日本総輸入販売元



OSTRICH™

株式会社オーストリッチインターナショナル

〒222-0033 横浜市港北区新横浜1-14-20

光正第2ビル301

TEL: 045-470-9041 (代) FAX: 045-470-9043

<http://www.ostrich.co.jp> / Email: info@ostrich.co.jp